



# Bonding-Serie

Starke Zähne,  
starker Verbund





**Für einen dauerhaft sicheren Verbund Ihrer Arbeiten.**

## Richtig verbinden

**Verschiedene Materialien benötigen verschiedene Bonder. Mit den Schütz-Bondern haben Sie immer das richtige Material zur Hand.**

Mit unseren Verbundsystemen verbinden Sie Kunststoffe, Komposite, Zirkondioxid und Metalle sicher miteinander. Wählen Sie Ihr Bonding je nach Indikation.

- Extrem hohe Haftwerte
- Sicherer und dauerhafter Verbund
- Perfekt aufeinander abgestimmtes System
- Direkt vom Hersteller

Jetzt online bestellen  
[www.schuetz-dental.de](http://www.schuetz-dental.de)



Bonding-Serie

| 2 |

### Schütz Materialien auf einen Blick:

#### Flüssige Haftvermittler für Gerüste

- Sebond Smart (S. 3)
- Sebond Smart Zr (S. 3)
- Sebond Implant (S. 5)

#### Pastöse Haftvermittler für Gerüste

- Sebond Pink (hell, dunkel) (S. 4)
- Sebond Bondopaker Dentin (S. 4)
- Sebond Grip (S. 5)

#### Bonder für den natürlichen Zahn

- Capo Etch (chemisches Ätzmittel)
- Capo Bond / Capo Bond Activator
- PrimeBond7 (7. Generation Bonding)

#### Befestigungskomposite

- Alphaslink
- Alphaslink Implant (S. 5) (auch für Labore)

#### Füllungs- oder Verblendkomposite

- Capo Natural
- Capo Bulk Fill
- dialog Vario

Für Labore

Für Praxen

# Sebond Smart

## Der bewährte Metall-Bonder

Der Metall-Bonder für den sicheren Verbund zwischen Kunststoff und Komposit mit Metall. Der Bonder ist **universell** auf allen gängigen Metallen und mit allen gängigen Komposit-Systemen anzuwenden.

### Ihre Vorteile:

- Extrem hohe Haftwerte
- Keine zusätzliche Lichtpolymerisation nötig
- Geruchsneutral
- Universell einsetzbar
- Für einen sicheren und dauerhaften Verbund
- Hohe biologische Verträglichkeit



Sebond Smart 5 ml, Art.-Nr. 640066

### Indikationen:

- Die chemische Adhäsion bei Komposit-Verblendungen
- Sicherer Verbund: Kunststoff/Komposit mit Metall

# Sebond Smart Zr

## Der innovative Zirkon-Bonder

Der Zirkonoxid-Bonder für den sicheren Verbund zwischen Zirkonoxid und Komposit. Dieser Bonder ist universell auf allen gängigen Zirkonoxiden und mit allen gängigen Komposit-Systemen anzuwenden.

### Ihre Vorteile:

- Keine zusätzliche Lichtpolymerisation nötig
- Für einen sicheren und dauerhaften Verbund
- Universell einsetzbar



Sebond Smart Zr 5 ml, Art.-Nr. 640068

### Indikation:

- Sicherer Verbund: Zirkonoxid/Komposit





Jetzt im Onlineshop bestellen:  
[www.schuetz-dental.de](http://www.schuetz-dental.de)

## Sebond Pink & Sebond Dentin


### Bonder und Opaker in einem

Der Bondopaker mit **extrem hoher Haftung** für einen **sicheren und dauerhaften Verbund**. Überzeugen Sie sich selbst von der komfortablen Handhabung und der Qualität der Ergebnisse.

Sie möchten Modellgüsse komplettieren? Dann ist dieser Bondopaker einfach das Richtige für Sie.

#### Ihre Vorteile:

- Opaker und Bonder in einem
- Sehr hohe Deckkraft
- Durch die Farbangleichung des Opakers mit dem Prothesenwerkstoff erreichen Sie vollendete, harmonische Ergebnisse
- Komfortables Arbeiten
- Sie brauchen zwei Arbeitsschritte weniger und können auf einen zusätzlichen Metall-Bonder verzichten
- Sichtbare Klammern „verschwinden“ in der Mundsituation durch die farbliche Angleichung
- Sparen Sie Zeit und Geld
- Monomerresistent und keine Schlieren im Kunststoff

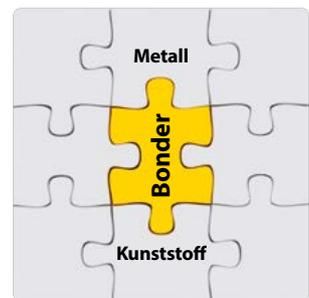


Sebond Pink hell 5 g, Art.-Nr. 644090  
Sebond Pink dunkel 5 g, Art.-Nr. 644091



Sebond Dentin A3 2 g, Art.-Nr. 644094  
Sebond Dentin A4 2 g, Art.-Nr. 644095  
Sebond Dentin B1 2 g, Art.-Nr. 644096  
Sebond Dentin C3 2 g, Art.-Nr. 644098  
Sebond Dentin D2 2 g, Art.-Nr. 644099

#### Indikationen:

- Zur Abdeckung von Modellguss-Sätteln und Klammern

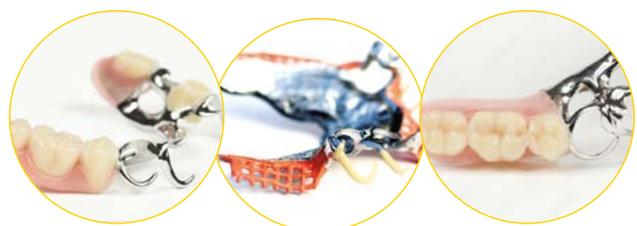


# Sebond Grip

## Universelle Grundierung

Der zusätzliche mechanische Verbund für noch mehr Sicherheit.

### Ihre Vorteile:



- Sebond Grip wird einfach zwischen Metall-Bonder und Pastenopaker aufgetragen
- Leichtes Fließverhalten – dünne Verbindungsschicht zum Primer auf Metall
- Pastenopaker muss nicht mehr als „Wash“ aufgetragen werden, Zeitersparnis für Sie
- Geringe Pigmentierung = deutlich schnellere Polymerisation
- Höhere Haftwerte und sehr gute chemische Anbindung bei beliebigen Pastenopakern
- Guter Verbund auch bei Systemen ohne Metall-Bonder
- Kau- und Abscherkräfte haben durch Sebond Grip kaum eine Chance

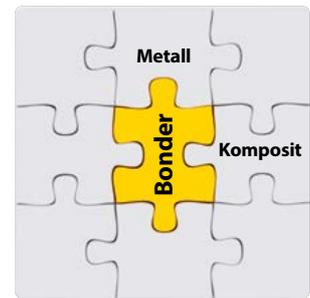

Sebond Grip 3 g, Art.-Nr. 644092

### Indikationen:

- Für Kunststoff-Verblendungen

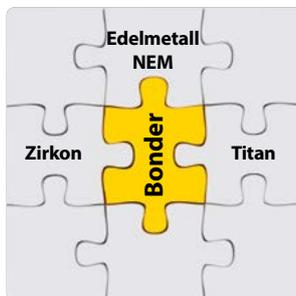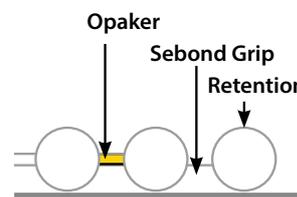

Sebond Implant 5 ml, Art.-Nr. 640075  
Alphalink Implant 2 x 4 g, Art.-Nr. 640076



# Sebond Implant & Alphalink Implant

## Stark im Doppelpack

### Indikationen:

Der Zirkonium CEM dient der

- 1. permanenten Befestigung von indirekten Restaurationen aus Metall (EM, NEM, Titan), Metalloxydkeramik (z. B. Zirkonoxid, Aluminiumoxid) oder Glaskeramik auf Implantatabutments aus Zirkonoxid.
- 2. adhäsiven Befestigung von Zirkonoxid-Konstruktionen auf Implantatabutments aus Zirkonoxid oder Metall (z. B. Titan)
- 3. Verklebung von Titan-Klebebasen mit individuellen Abutments aus Zirkonoxid

Der Zirkonprimer dient als Haftvermittler

- 1. für die oben aufgeführten Indikationen
- 2. zwischen Kunststoffen/Kompositen und Zirkonoxid



Implantat geklebt auf Titan-Klebebasis

### Das komplette System besteht aus:

**Sebond Implant:** Der Haftvermittler bereitet die Zirkonoxidoberfläche für einen sicheren Verbund vor.

**Alphalink Implant:** Das Befestigungskomposit verbindet Ihr Gerüst mit dem Abutment.

### Ihre Vorteile:

- Speziell für den Verbund mit Zirkondioxid entwickelt, daher ein Höchstmaß an Sicherheit
- Intraorale Anwendung = schnelles Aushärten
- Anwendung auf Modell = längere Verarbeitbarkeit
- Hohe Haftwerte

Abbildungen können abweichen.

SCHÜTZ DENTAL

# dialog Bonding Fluid


## – der universelle Kunststoffverbund

### Indikationen:

- Individualisierung, Erweiterung und Reparatur von lichthärtenden Verblendmaterialien und Kunststoffen

### Ihre Vorteile:

- Lichthärtend
- Bildet eine sichere Verbindungsschicht zwischen Komposit/Komposit und Komposit/Kunststoff
- Ästhetische Individualisierungen (keine dunklen Ränder)
- Sehr gut zu verarbeiten
- Durch die spezielle Formel können auch hoch vernetzte konfektionierte Kunststoffzähne mit Hilfe dieses Bonders einfach und sicher individualisiert werden

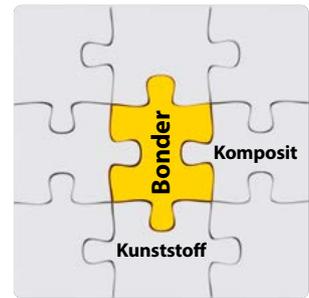

dialog Bonding Fluid 7 ml,  
Art.-Nr. 643922

Abbildungen können abweichen.

Praxismaterialien auch im Onlineshop [www.schuetz-dental.de](http://www.schuetz-dental.de)



**Jetzt einfach anmelden  
und direkt bestellen!**



Breites  
Produktsortiment



Schnelle  
Lieferung



Vertrauen &  
Sicherheit



Clever sparen  
mit Kombi-Angeboten

## Das passt dazu

### Futura Serie

Erfahren Sie selbst, welche **herausragenden ästhetischen** Arbeiten Sie mit den **farbstabilen Kunststoffen** aus der Futura-Serie erzielen können.



### Comtray

Hochvernetzter, lichthärtender, **sofort verarbeitungsfähiger** Kunststoff in vorgefertigter Form auf **Komposit-Basis**. Zur Erstellung von individuellen Abformlöffeln, Basisplatten und Aufstellbehelfen.



Art.-Nr. weiß 658035  
Art.-Nr. rosa 658030

### HS Cross-Liquid

Das hochaktive, chemische Aufrauhmittel, mit dem Sie **kreuzvernetzte Zähne sicher** mit dem Prothesenkunststoff **verbinden**.



Art.-Nr. 659140

### Calibris Polierbürsten

Diese Polierbürste ist ideal zur Politur von Kunststoffprothesen. Der integrierte Leinenschwabbel **intensiviert** das Polieren und Sie **sparen Zeit**.



Art.-Nr. 660050

### FuturaSep Plus

Einkomponenten-Isoliermittel auf Alginatbasis. Zur **sicheren Isolierung** von Gips gegen Kunststoffe.



Art.-Nr. 659121

### MicroClean

Duales Prothesenreinigungssystem: Mechanische und chemische Reinigung in einem. Besonders **schonendes Arbeiten** durch speziell abgerundete Reinigungsnadeln.



Art.-Nr. 676410

### Futura Polish Polierpaste

Die **saubere Art**, Kunststoff zu polieren. Mit dieser Polierpaste haben Sie im Handumdrehen eine **hochglanzpolierte Prothese**. Und all das ohne nasses Bimspulver.



Art.-Nr. 659123

### Kunststofffräser spezial

Für Prothesenkunststoffe, Gips, Löffel- und Modellstumpfmateriale



Art.-Nr. 681204



Wir sind gerne für Sie da!



06003 814-0



info@schuetz-dental.de



www.schuetz-dental.de

## Schütz Dental Newsletter

Jetzt registrieren und immer einen Schritt voraus sein.

Profitieren Sie von exklusiven Angeboten und Aktionen mit unseren Newslettern zu den Themenbereichen Zahntechnik, Zahnmedizin und Implantologie. Verpassen Sie nie wieder wichtige Informationen oder Veranstaltungen von Schütz Dental.

Registrieren Sie sich gleich unter: [sdent.eu/newd](https://sdent.eu/newd)

## Onlineshop

Schnell und einfach online bestellen.

Bestellen Sie rund um die Uhr, wann und wo immer Sie möchten. Ganz bequem über unseren Schütz Dental Onlineshop. Registrieren Sie sich jetzt und bestellen Sie direkt, einfach und schnell online.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.  
Die gezeigten Angaben sind Beispiele, wir unterbreiten Ihnen gerne ein konkretes Angebot.

[www.schuetz-dental.de](https://www.schuetz-dental.de)

Besuchen Sie uns online!



Schütz Dental GmbH • Dieselstr. 5-6 • 61191 Rosbach/Germany • Tel. +49 (0) 6003 814-0 • Fax +49 (0) 6003 814-906  
[www.schuetz-dental.de](https://www.schuetz-dental.de) • [info@schuetz-dental.de](mailto:info@schuetz-dental.de)

