

Der neue Tizian Smart-Scan Plus 3.0


Streifenlicht LED Labor-Tischscanner



Hohe Schnelligkeit: Ganzkieferabtastung in 8 Sek.

Hochauflösendes Vier-Kamera-System

Hohe Genauigkeit: bis zu 4 µm

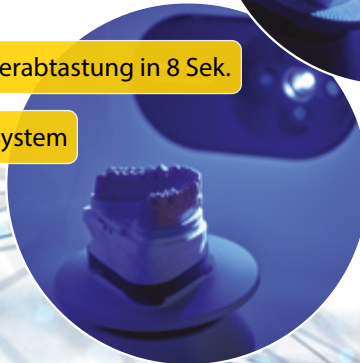

Erreichen Sie mehr mit weniger Aufwand

Ein eleganter hochentwickelter Scanner, der nicht nur gut, sondern auch mit Stil funktioniert

1. Superschnelles Scannen

Scannen Sie mit unserer hochwertigen Hardware und optimierten Software. Führen Sie mit dem Tizian Smart-Scan Plus 3.0 eine **Ganzkieferabtastung in nur 8 Sekunden** durch.

2. Hohe Genauigkeit

Genauigkeit bis zu 4 Mikrometer

3. Offenes System

Genießen Sie die Freiheit unseres offenen Systems, mit dem Sie Dateien im STL Format importieren und exportieren können, sodass Sie mit fast jeder Software Ihre Entwürfe anfertigen können.

4. Flexibles Multi-Modell-Scannen

Machen Sie Ihre Arbeit noch effizienter, indem Sie mit dem flexiblen Multi-Modell-Scannen einen Ganz- oder Teilkieferscan mit mehreren Matrizen gleichzeitig erstellen.

5. Hochauflösende Kameras

Unsere **5,0 MP Kameras** sorgen für hochauflösende detaillierte Scan Daten. Scannen Sie mehr Objekte gleichzeitig dank des größeren Scan-Bereichs. Mit dem **Vier-Kamera-System** deckt der Tizian Smart-Scan Plus 3.0 einen weiten Scanbereich ab und eliminiert tote Winkel.

6. Automatisches Anheben

Einfach zu bedienen: Dank unserer Funktion zum automatischen Anheben können Sie sich vom Übereinanderstapeln von Zwischenhaltevorrichtungen für die richtige Scanposition verabschieden.

3.
Achse
inkl.



Herkömmlich
5 Schritte

Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4



Schritt 5



Flexible multi-die
2 Schritte

Schritt 1



Schritt 2



Fragen Sie
Ihren Verkäufer
nach einem
individuellen
Angebot!



Noch genialer in Verbindung mit unserem

Intraoral-Scanner

Perfekt integriert ...

... in den Complete Digital Workflow von Schütz Dental

Ob Zahntechniker, Zahnarzt oder Implantologe: Heben Sie sich jetzt von Ihrem Wettbewerb ab.

- **Hohe Sicherheit:** Der direkte Import der Daten minimiert die Fehlerquote.
- **Voraussehbare Erfolge:** Schon bei der Planung alle wichtigen Kriterien für eine Top-Ästhetik und Funktion mit einbeziehen.
- **Unabhängigkeit:** Durch die offenen Systemkomponenten.
- **Höhere Kosteneffizienz:** Durch den direkten Import der verschiedenen Daten beschleunigen Sie Ihren Arbeitsprozess.
- **Erstklassiger Support:** Da die Komponenten aus einem Hause kommen, haben Sie immer den richtigen Ansprechpartner.

Technische Daten

Genauigkeit (ISO 12836)	4 µm
Scangeschwindigkeit Ganzkieferabtastung	8 Sek. (7 Schnitt)
Scangeschwindigkeit Ganzkieferabdruck	45 Sek.
Lichtquelle	Blaue LED, 150 ANSI-Lumen
Abmessungen	505 mm x 271 mm x 340 mm
Gewicht	ca. 15 kg



Die gezeigten Angaben sind Beispiele, wir unterbreiten Ihnen gerne ein konkretes Angebot.
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

SCHÜTZ DENTAL
Micerium Group

Schütz Dental GmbH • Dieselstr. 5-6 • 61191 Rosbach/Germany • Tel. +49 (0) 6003 814-0 • Fax +49 (0) 6003 814-906
www.schuetz-dental.de • info@schuetz-dental.de